

# 3M

# Tegaderm™

Apósito para el Aseguramiento del Sitio I.V.  
con Gluconato de Clorhexidina (CHG)

## La diferencia es clara.

Para el catéter arterial o periférico, sólo los Apósitos Avanzados Tegaderm™ CHG combinan los elementos más críticos del cuidado del Sitio I.V. en un producto único y fácil de usar.

- ▶ **Completa visibilidad del sitio de inserción**
- ▶ **Protección antimicrobiana con Gluconato de Clorhexidina**
- ▶ **Aseguramiento / Estabilización del catéter**
- ▶ **Transpirable**




# Apósito Transparente 3M™ Tegaderm™ CHG para el Aseguramiento del Sitio I.V. con Gluconato de Clorhexidina

1660

## Almohadilla de gel antimicrobiano integrado con CHG

- ▶ 2% del CHG está integrado en la almohadilla de gel, por lo que no puede caerse, olvidarse o ser aplicado incorrectamente
- ▶ La almohadilla de gel transparente proporciona visibilidad del área
- ▶ Se adapta alrededor del catéter y el conector para una cobertura CHG completa
- ▶ Proporciona protección inmediata y continua hasta por 7 días, incluso en presencia de sangre y exudado
- ▶ Absorbe sangre y otros fluidos
- ▶ Se activa sin necesidad de humedecer la piel

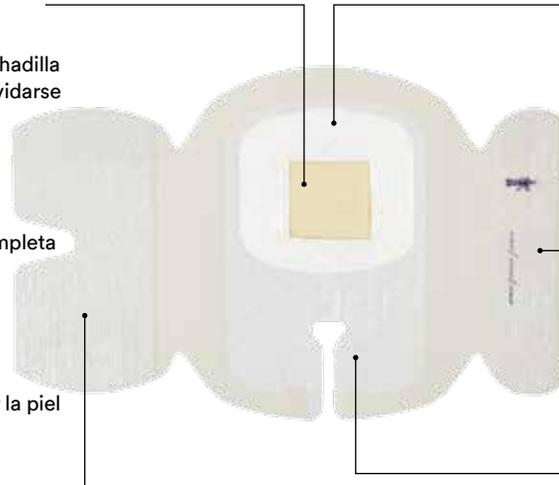

## Película transparente altamente transpirable

- ▶ Proporciona una barrera a los contaminantes externos incluyendo líquidos, bacterias y virus\*
- ▶ Promueve el intercambio gaseoso

## Tira de estabilización y documentación

- ▶ Incluye etiquetas preimpresas para documentar los cambios en el apósito
- ▶ El recubrimiento de película proporciona una barrera contra contaminantes externos\*
- ▶ También se puede utilizar para asegurar los conectores, lúmenes y tubos

## Cinta adhesiva grande con corte

- ▶ Permite una aplicación consistente y mejora la estabilización
- ▶ Incluye pestañas sin adhesivo para minimizar la posibilidad de quedar adherida a los guantes o a sí misma

## Borde de estabilización reforzado

- ▶ El corte profundo se ajusta alrededor de los conectores y lúmenes del catéter
- ▶ Borde ajustable y flexible con el movimiento del paciente, puede ayudar a reducir el levantamiento de los bordes
- ▶ La cubierta estampada adhesiva se sujeta firmemente, libera la humedad y se puede retirar suavemente

El diseño integrado permite una fácil aplicación.



Producto	Número de Producto	Tamaño de la almohadilla de gel CHG	Tamaño general del apósito	Unidades/Caja	Caja/Estuche
<b>Apósito para Fijación 3M™ Tegaderm™ Gluconato de Clorhexidina (CHG) I.V.</b>					
	1660	2 cm x 2 cm ¾ in x ¾ in	7 cm x 8,5 cm 2 ¾ in x 3 ⅜ in	25	4

Para obtener más información acerca del Apósito Tegaderm™ CHG o para solicitar una evaluación del producto en sus instalaciones, visítenos en [3M.com/TegadermCHG](http://3M.com/TegadermCHG), comuníquese con su representante de 3M Critical & Chronic Care Solutions o llame a la línea de atención al cliente de 3M Health Care al **1-800-228-3957**. Fuera de los Estados Unidos, póngase en contacto con la filial local de 3M.

\*Pruebas *in vitro* muestran que la película transparente de los Apósitos 3M™ Tegaderm™ CHG proporciona una barrera viral contra virus de 27 nm de diámetro o más mientras el apósito permanezca intacto sin filtración.



## División Soluciones para el Cuidado Crítico y Crónico 3M Salud

2510 Conway Avenue  
St. Paul, MN 55144 USA  
1-800-228-3957  
[www.3M.com/C3SD](http://www.3M.com/C3SD)

Favor de reciclar.

3M y Tegaderm son marcas registradas de 3M.  
© 3M, 2017. Todos los derechos reservados.  
70-2011-5645-5